



Banana X-ray Helper

X 光助手 · 使用說明 · 使用说明

User manual — English · 繁體中文 · 简体中文

English — X-ray Helper — how to use

繁體中文 — X 光助手 — 使用說明

简体中文 — X 光助手 — 使用说明

⚠ The one rule · 最重要 · 最重要

Click the **Window** tab, then click the **X-ray software** window, then **Share**.

按「視窗」分頁 → 選 **X 光軟件** 的視窗 → 按「分享」。

点「窗口」标签 → 选 **X 光软件** 的窗口 → 点「共享」。

X-ray Helper — how to use

English

The X-ray Helper is a small yellow bar that floats above your X-ray software. When a new X-ray appears, one click crops it and saves it to the patient open in Banana — no exporting, no saving files, no drag-and-drop.

Before you start

- Use **Google Chrome** or **Microsoft Edge**, opened from the Banana desktop shortcut.
- Open the **patient** in Banana (Consultation → X-ray tab).
- Open the **X-ray software** as usual.

1 Open the helper


- On the X-ray tab, click  **X-ray Helper**. The yellow bar appears.
- Drag the bar by its edge to the **top of the X-ray software** (its title/toolbar area), so it never covers the X-ray. Chrome remembers this place next time.



2 Share the X-ray software window

Chrome now asks **what to share**. This is the one step people get wrong:

- Click the **Window** tab, then click the **X-ray software** window, then **Share**.
- Or use **Entire screen** (with two monitors, pick the one with the X-ray software).
- **Do NOT choose “Chrome tab”**, and do not pick the Chrome / Banana window — that shares Banana itself, not the X-ray. The X-ray software is a separate program in its own window.

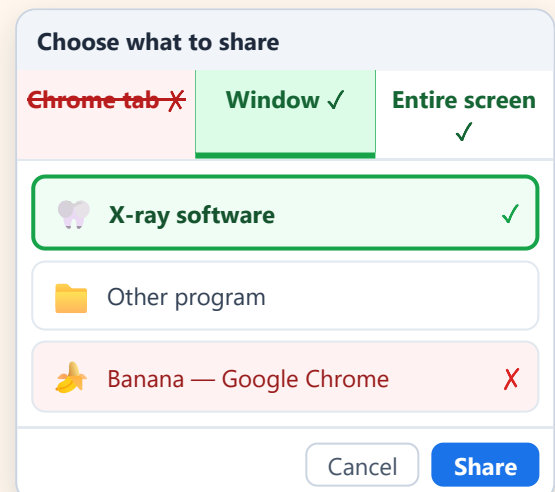

You only share once per session. A **green dot** on the bar means sharing is on. If you shared the wrong thing, press **Stop**, then **Share screen** and choose again.

3 Capture the X-ray

Take the X-ray as usual. When it appears on screen, press one of these on the yellow bar:

- 🌟 **Auto** — Banana finds the X-ray for you and outlines it. Press **Enter** (or ✓ Use this). Several films on screen? Press **Tab** to jump to the next one. Wrong area? Just drag instead.
- ⌘ **Selection** — the screen dims; drag a box over the X-ray. Letting go of the mouse crops it.
- 🔄 **Same area** — crops exactly the same box as last time on this computer, with no dragging. Best when the software always shows the X-ray in the same place.

4 Check and save

- Banana comes to the front with the usual **Upload X-Ray** panel.
- Check **Upload to** shows the right patient. If it turns **red**, the patient was changed after capturing — the upload is blocked; open the right patient and capture again.
- Check the **X-ray type** (Banana guesses it from the shape — please confirm), the date and notes.
- Press **Confirm Upload**. The X-ray opens in the viewer and the bar shows ✓ **Saved**.

Problems?

The picture shows Banana, not the X-ray

A Chrome tab was shared. Press Stop → Share screen → Window → X-ray software.

The picture is black or old

The X-ray software window is minimised. Restore it, then capture again.

“Screen size changed”

The screen layout changed since last time. Use ⌘ Selection once; Same area works again after that.

“No X-ray found automatically”

Just drag over the X-ray. Auto works best when the X-ray is large on screen.

The bar does not open

Open Banana from the desktop shortcut (an address starting with <http://127.0.0.1> or <https://>).

Cancel a selection

Press Esc. X on the bar closes the helper; Stop ends screen sharing.

X-rays are saved at full screen resolution as lossless greyscale PNG — sharp, and small to store.

X 光助手是一條浮在 X 光軟件上方的黃色小工具列。X 光一出現，按一下就能截取並儲存到 Banana 目前開啟的病人 — 無需匯出、無需另存檔案、無需拖放。

開始前

- 使用 **Google Chrome** 或 **Microsoft Edge**，並從 Banana 桌面捷徑開啟。
- 在 Banana 開啟病人（診症 → X 光分頁）。
- 照常開啟 X 光軟件。

1 開啟助手


- 在 X 光分頁按  **X 光助手**，黃色工具列會出現。
- 拖動工具列邊緣，把它放到 **X 光軟件的頂部**（標題列 / 工具列位置），以免遮住 X 光。Chrome 下次會記住這個位置。



2 分享 X 光軟件視窗

Chrome 會問要分享甚麼。這是最容易選錯的一步：

- 按「視窗」分頁 → 選 **X 光軟件** 的視窗 → 按「分享」。
- 或選「整個畫面」（有兩個螢幕時，選顯示 X 光軟件的那一個）。
- **不要選「Chrome 分頁」**，也不要選 Chrome / Banana 的視窗 — 那樣分享的是 Banana 本身，而不是 X 光。X 光軟件是另一個程式，在它自己的視窗裏。

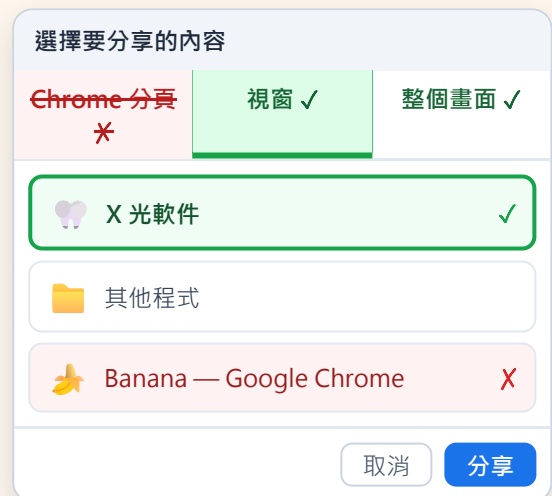

每次開啟只需分享一次。工具列上的綠點表示正在分享。如果選錯了，按「停止」，再按「分享畫面」重新選擇。

3 截取 X 光

照常拍攝 X 光。X 光在畫面出現後，在黃色工具列按以下其中一個：

- 🌟 **自動** — Banana 自動找出 X 光並框好。按 **Enter** (或「✓ 使用」)。畫面有多張片？按 **Tab** 跳到下一張。範圍不對？直接拖選即可。
- ✂ **選取** — 畫面變暗，用滑鼠在 X 光上拖出方框，放開滑鼠即截取。
- 🔄 **同一範圍** — 在這部電腦上截取與上次完全相同的範圍，無需拖選。適合 X 光每次都在同一位置顯示的軟件。

4 檢查並儲存

- Banana 會自動回到前面，並開啟平常的 **上載 X 光** 面板。
- 確認「**上載到**」是正確的病人。如果變成**紅色**，表示截取後病人已被更換 — 系統會阻止上載；請開啟正確病人再截取一次。
- 確認 **X 光類型** (Banana 會按形狀估計，請確認)、日期及備註。
- 按「**確認上載**」。X 光會在檢視器中開啟，工具列顯示 ✓ **已儲存**。

遇到問題？

截到的是 Banana，而不是 X 光

分享了 Chrome 分頁。按「停止」→「分享畫面」→「視窗」→ X 光軟件。

畫面是黑色或舊的

X 光軟件視窗被最小化了。還原視窗後再截取。

「畫面尺寸已改變」

畫面佈局與上次不同。先用一次「✂ 選取」，之後「同一範圍」便可再用。

「未能自動找到 X 光」

直接拖選 X 光即可。X 光在畫面上愈大，自動功能愈準確。

工具列開不到

請從桌面捷徑開啟 Banana (網址以 <http://127.0.0.1> 或 <https://> 開頭) 。

取消選取

按 Esc。工具列上的 ✕ 關閉助手；「停止」結束畫面分享。

X 光以原畫面解像度儲存為無損灰階 PNG — 清晰，而且佔用空間少。

X 光助手是一条浮在 X 光软件上方的黄色小工具栏。X 光一出现，点一下就能截取并保存到 Banana 当前打开的病人 — 无需导出、无需另存文件、无需拖放。

开始前

- 使用 **Google Chrome** 或 **Microsoft Edge**，并从 Banana 桌面快捷方式打开。
- 在 Banana 打开**病人**（诊症 → X 光标签）。
- 照常打开 **X 光软件**。

1 打开助手


- 在 X 光标签点 👉 **X 光助手**，黄色工具栏会出现。
- 拖动工具栏边缘，把它放到 **X 光软件的顶部**（标题栏 / 工具栏位置），以免遮住 X 光。Chrome 下次会记住这个位置。



2 共享 X 光软件窗口

Chrome 会问**要共享什么**。这是最容易选错的一步：

- 点「**窗口**」标签 → 选 **X 光软件** 的窗口 → 点「**共享**」。
- 或选「**整个屏幕**」（有两个显示器时，选显示 X 光软件的那一个）。
- **不要选「Chrome 标签页」**，也不要选 Chrome / Banana 的窗口 — 那样共享的是 Banana 本身，而不是 X 光。X 光软件是另一个程序，在它自己的窗口里。

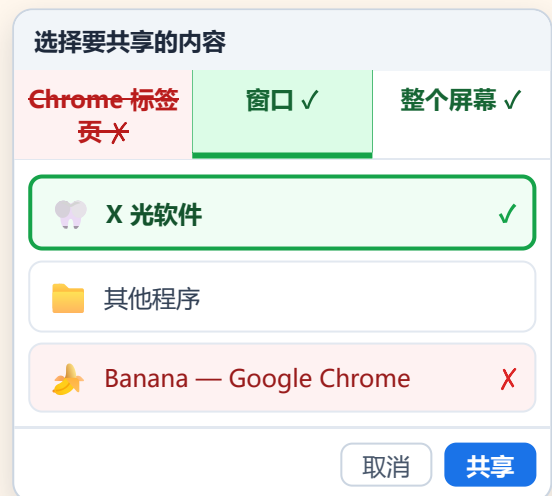

每次打开只需共享一次。工具栏上的**绿点**表示正在共享。如果选错了，点「**停止**」，再点「**共享屏幕**」重新选择。

3 截取 X 光

照常拍摄 X 光。X 光在屏幕出现后，在黄色工具栏点以下其中一个：

- 🌟 **自动** — Banana 自动找出 X 光并框好。按 **Enter**（或「✓ 使用」）。屏幕有多张片？按 **Tab** 跳到下一张。范围不对？直接拖选即可。
- ✂ **选取** — 屏幕变暗，用鼠标在 X 光上拖出方框，松开鼠标即截取。
- 🔄 **同一范围** — 在这台电脑上截取与上次完全相同的范围，无需拖选。适合 X 光每次都在同一位置显示的软件。

4 检查并保存

- Banana 会自动回到前面，并打开平常的 **上传 X 光** 面板。
- 确认「**上传到**」是正确的病人。如果变成**红色**，表示截取后病人已被更换 — 系统会阻止上传；请打开正确病人再截取一次。
- 确认 **X 光类型**（Banana 会按形状估计，请确认）、日期及备注。
- 点「**确认上传**」。X 光会在查看器中打开，工具栏显示 ✓ **已保存**。

遇到问题？

截到的是 Banana，而不是 X 光

共享了 Chrome 标签页。点「停止」→「共享屏幕」→「窗口」→ X 光软件。

画面是黑色或旧的

X 光软件窗口被最小化了。还原窗口后再截取。

「画面尺寸已改变」

屏幕布局与上次不同。先用一次「✂ 选取」，之后「同一范围」便可再用。

「未能自动找到 X 光」

直接拖选 X 光即可。X 光在屏幕上越大，自动功能越准确。

工具栏打不开

请从桌面快捷方式打开 Banana（网址以 <http://127.0.0.1> 或 <https://> 开头）。

取消选取

按 Esc。工具栏上的 × 关闭助手；「停止」结束屏幕共享。

X 光以原屏幕分辨率保存为无损灰度 PNG — 清晰，而且占用空间少。